

Flow Gentle+

P形

酸素アウトレットバルブ

G形

酸素ボンベ
ネジ式バルブ付

Y形

酸素ボンベ
ヨーク式バルブ付

⚠ 注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。

●製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

■仕 様

項目	形式	P 形	G 形	Y 形
一般的名称		酸素治療フローメータ	高圧ガスレギュレータ	
販 売 名		フロージェントル プラス P形	フロージェントル プラス G形	フロージェントル プラス Y形
承認番号／届出番号		承認番号 21200BZZ00203000 届出番号 10B2X00014B00001	承認番号 10B2X00014B00001 届出番号 10B2X00014B00002	承認番号 10B2X00014B00002 届出番号 10B2X00014B00002
用 途		アウトレットバルブ	ネジ式酸素容器	ヨーク式酸素容器
仕 様 ガス		日本薬局方酸素（純度99.5%以上）		
入 口 圧 力		0.44MPa以下	19.6MPa以下	
出 口 圧 力		0.14MPa以下	※ P-35LHは0.34MPa以下	
一次圧力計			0～30MPa(禁油)	
重 量		300±10g(P-1Lのみ:350±10g)	740g	525g
クラス分類		管理医療機器	一般医療機器・特定保守管理医療機器	

■ 流量範囲表

	形 式	流 量 設 定 目 盛 (L/min)												備考
P形	P-1L	0	1/64 (0.016)	1/32 (0.031)	1/16 (0.062)	1/12 (0.083)	1/8 (0.125)	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	◎
	P-2L	0	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	
	P-10LF	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	◎
	P-35LH	0	5	8	10	12	15	17	20	22	25	30	35	
G形	G-4L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	4	
	G-6L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	3	4	5	6	
	G-10L	0	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	10	
	G-10LF	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	◎
	G-15L	0	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	12	15	
Y形	Y-1L	0	1/64 (0.016)	1/32 (0.031)	1/16 (0.062)	1/12 (0.083)	1/8 (0.125)	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	◎
	Y-4L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	4	
	Y-6L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	3	4	5	6	
	Y-8L	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	
	Y-10L	0	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Y-15L	0	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	12	15	
	Y-10LF	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	◎

※注1：形式末尾が(F)のものは、ホース差しタイプとなり、加湿器は付属しません。

※注2：◎印のものは特別仕様となります。

※注3：P-35LH はハンドルが青になります。

人とともに呼吸する。

発売元：株式会社 小池メディカル

本社 〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
TEL.03-5662-6605 (代)
<http://www.koike-medical.co.jp/>

製造販売元
株式会社 群馬コイケ 〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町222-1

■ お問い合わせ


人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

酸素流量調整器<フロージェントル プラス>

Flow Gentle+

P形 / G形 / Y形

P形：承認番号 21200BZZ00203000
G形：届出番号 10B2X00014B00001
Y形：届出番号 10B2X00014B00002

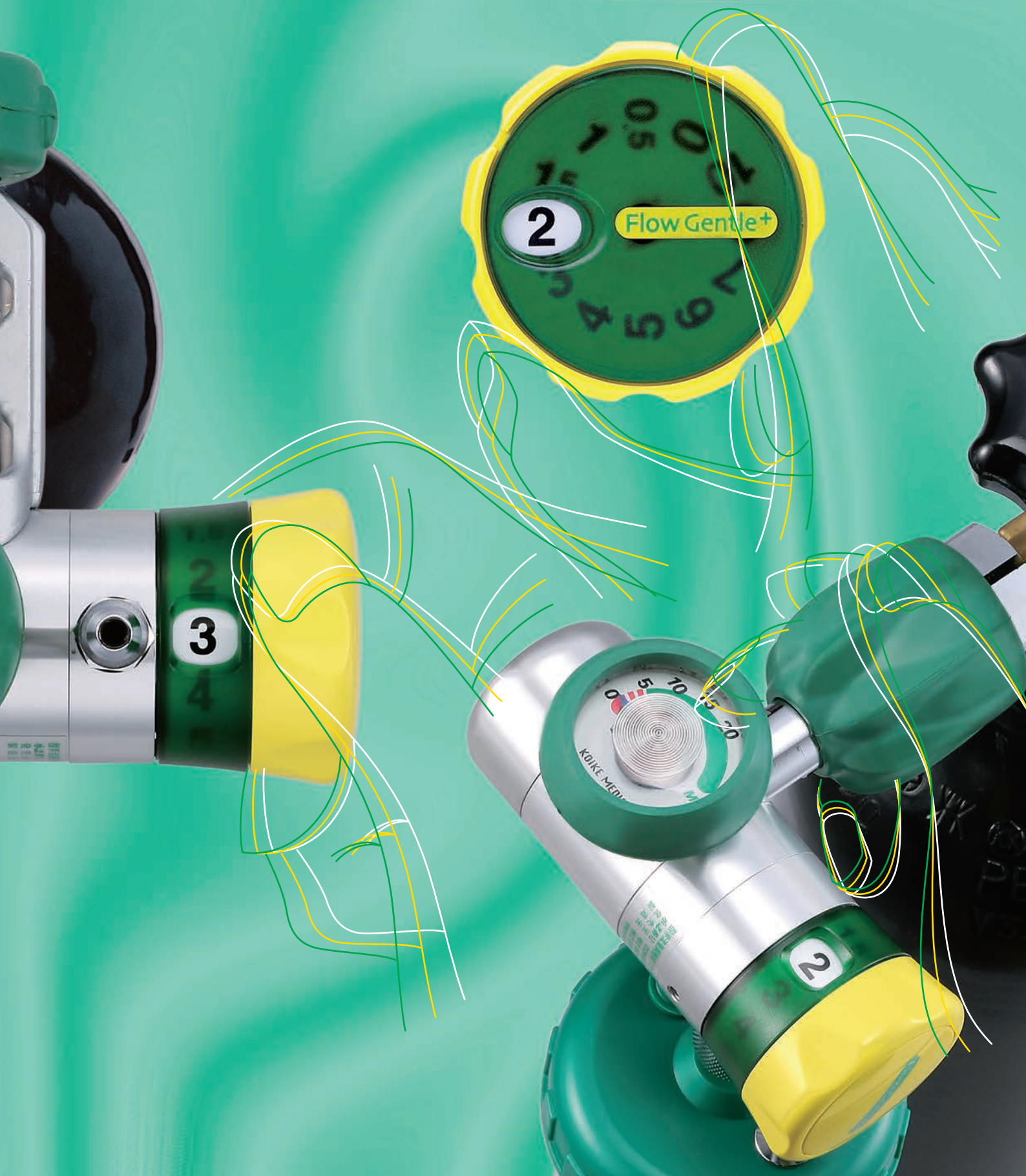

使いやすさと安全をひとつに。

扱いやすく、持ち運びやすく、見やすい。
これらの設計コンセプトが、
より高い安全性を生みました。

大きく見やすい、処方流量設定

大きな表示窓、グリーンのスkelトンカバー、
白地に黒のコントラストをつけた大きな文字
の採用により、表示位置、処方流量設定が
ひと目でわかります。



プロテクター付き薄型圧力ゲージ

ゴム製プロテクターを取りつけた圧力ゲージ
を調整器の上部に取りつけて、不意の接触・
転倒による圧力計破損を防ぐデザインにしま
した。また、ドーム型により圧力表示が見や
すくなりました。(G形・Y形)




簡単・手締めハンドルの採用

G形、Y形それぞれのハンドルにゴム素材を
採用、ボンベへの調整器の着脱が容易にな
りました。特にG形はスパナを使用すること
なく、調整器の着脱が可能です。(G形・Y形)



一次圧室に真鍮及び断熱圧縮熱発生防止機構を採用

ボンベバルブを急激に開いた時の、酸素の断熱圧縮による
発火事故を防止する、二重安全構造です。(G形・Y形)
(19.6MPa対応)

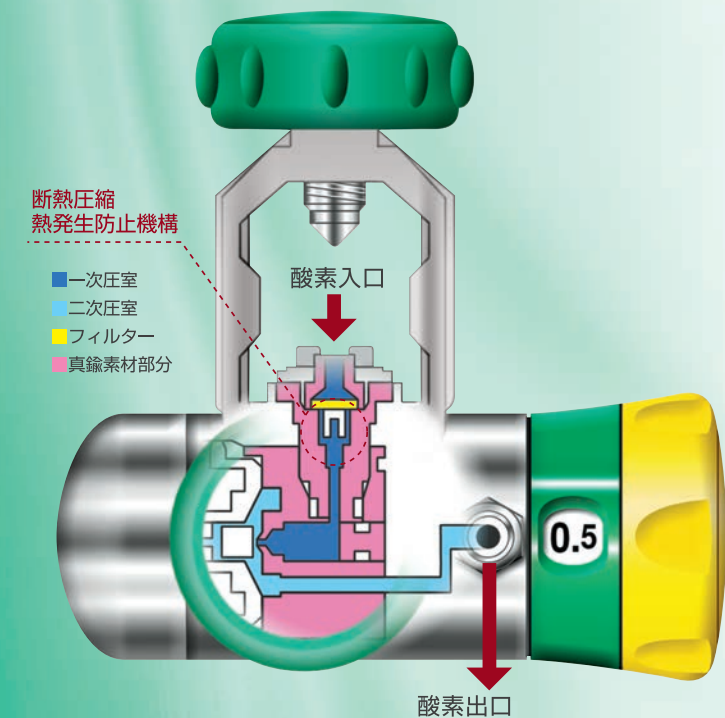


Flow Gentle+ LINE UP

酸素アウトレットバルブ用



- P-1L
- P-2L
- P-10LF
- P-35LH

カラー (イエロー)
(ホワイト)

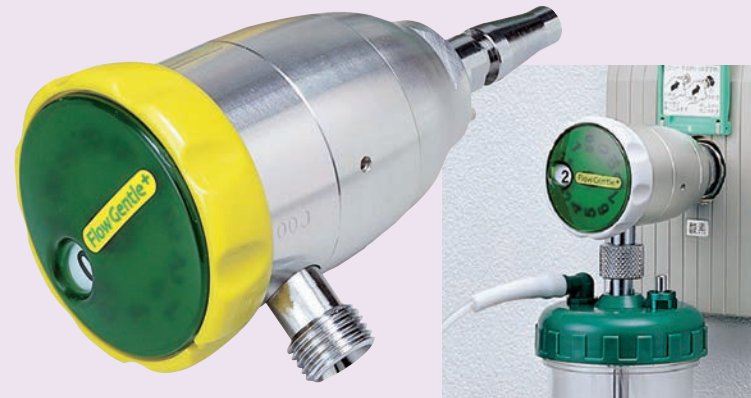

院内アウトレット装着例 (ホワイト)

左記以外の流量が必要な場合はこちらをご使用ください。



Flow Gentle i8 フロー ジェントル アイハー

- 18チャンネルの幅広い流量設定。
- うっかりミスを防げる視流計。
- 組み合わせ安心の出口圧0.34MPa

流量設定目盛 (L/min)																	
0	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15

ネジ式バルブ付酸素ボンベ用



- G-4L
- G-6L
- G-10L
- G-10LF
- G-15L



ソフトグリップ式手締めハンドル

ボンベの取付けに、スパナ不要。
ソフトグリップですから手にやさしく
ナース作業もスムーズです。



垂直修正機構



加湿器の接続部分が
回転するため、斜めに
しても加湿器は常に垂
直を維持できます。

ヨーク式バルブ付酸素ボンベ用



- Y-1L
- Y-4L
- Y-6L
- Y-8L
- Y-10L
- Y-10LF
- Y-15L



携帯用ボンベにはこのY型。

ソフトグリップ式手締めハンドル
と大きく見やすい流量表示が在宅
酸素の患者さんに最適です。

Y形ボンベ装着例



アクセサリ

- 加湿器
- 視流計

P形、G形に取りつけるアクセサリ
として、加湿器・視流計を
お選びいただけます。
鼻腔や咽喉の乾燥を訴える患者さんの
酸素吸入には加湿器を、
低流量の酸素吸入・搬送時など、
加湿を行わない酸素吸入には視流計を
取りつけてください。

● 加湿器



容量：250cc

● 視流計

赤いボールで酸素の流れを、
ひと目で確認できます。
ナースのうっかりミス防止や
故障により酸素供給されない
時のリスクマネジメントとし
て、安心な器具です。

