

仕様

一般的名称	酸素治療フローメータ	●管理医療機器
販売名	セフティフロー	
認証番号	21000BZZ00016000	

形式	用途	流量範囲 (L/min)	加湿器	加湿方式
P311	パイピング用	1~15	無	—
P312	//	5~35	無	—
P315	//	0.25~10	無	—
P321	//	1~15	有	バブル式
P325	//	0.25~10	有	バブル式

一般的名称	高圧ガスレギュレータ	●一般医療機器
販売名	セフティフロー P323T	●特定保守管理医療機器
届出番号	10B2X00014B00034	

用途	流量範囲 (L/min)	レギュレータ	圧力計	加湿方式
ボンベ用	1~15	有	24.5Mpa (250kgf/cm ²)	バブル式


一般的名称	高圧ガスレギュレータ	●一般医療機器
販売名	セフティフロー P326T	●特定保守管理医療機器
届出番号	10B2X00014B00035	

用途	流量範囲 (L/min)	レギュレータ	圧力計	加湿方式
ボンベ用	1~15	有	24.5Mpa (250kgf/cm ²)	バブル式

一般的名称	非加熱式加湿器	●一般医療機器
販売名	セフティ加湿器 Q201	
届出番号	10B2X00014D00001	

部品リスト

《部品のご注文に際しては、部品名称・番号をお知らせください。》

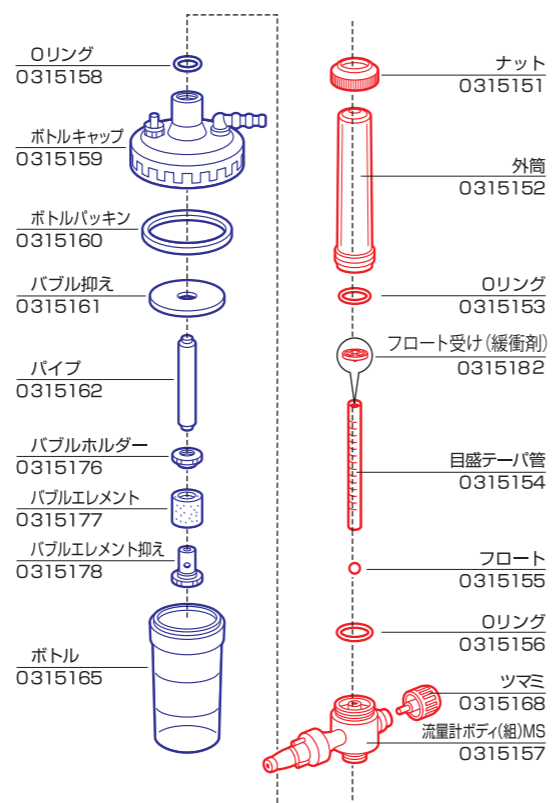

注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

酸素が見える



お問い合わせは



〈P-321形〉

※給水の際は精製水をご使用ください。

P-326形

手締めハンドル
手に優しいソフトゴム製グリップ。

使いやすく。安心設計機構。

- ・断熱圧縮熱発生防止機構。
 - ・手締めハンドル。スパナが不要です。
 - ・垂直修正機構。
- P-326形は流量計が回転式のため、加湿器を常に垂直に維持できます。

〈セフティ加湿器 2タイプ〉



標準タイプ



アダプターナット

ワンタッチ式
アダプターナットの装着により、濃縮器・リベレータのどちらにも使用できます。



P-323形

〈垂直修正機構〉

酸素が見・え・る

酸素の流れがフロート(ボール)の上下ではっきりわかります。見ながら流量設定。簡単で安全な酸素流量計、セフティフロー。

特長

- シンプルな構造。部品が少なくメンテナンスが容易です。
- 見やすいフロート管。流量設定が容易です。
- 警笛付きの安全機構。チューブの折れ曲がりなどによるボトル内圧上昇を警笛でお知らせします。
- ディスポタイプの子精製水の取付も簡単です。

