

壁かけ式ディスポ吸引器

yoex S-801 DISPO mikan
ヨックスディスポ ミカン

■仕様

販売名	ヨックスディスポミカン S801
届出番号	10B2X00014C00015
入口吸引圧力	-60～-80kPa
吸引圧力調整範囲	0～-60kPa
吸引圧力調整目盛	OFF、-10、-20、-30、-40、-50、-60
セット内容	●コントローラー●キャニスタホルダー●キャニスタ ●ホースハンガー●アダプターホース（アダプター付） ●Vacプロテクター●ペイシエントホース

セット品の重量	約 2 kg
製造販売元	株式会社群馬コイケ

●一般医療機器 ●特定保守管理医療機器

■オプション

一般的名称	吸引器用キャニスタ
販売名	ヨックスディスポミカン用ライナー O
届出番号	13B1X00009000106
容量	1,000ml
外形寸法	200×227mm
重量	60±10g
製造販売元	株式会社小池メディカル

●一般医療機器 ●再使用禁止

品名		商品コード	JANコード
S801 ヨックスディスポミカン ピンクグレープN	MS	366011	4582350176469
S801 ヨックスディスポミカン ライムN	MS	366012	4582350176476
S801 ヨックスディスポミカン オレンジN	MS	366013	4582350176483
S801 ヨックスディスポミカン ミントN	MS	366017	4582350176490
S801 ヨックスディスポミカン ピンクグレープN	AM	366014	4582350176506
S801 ヨックスディスポミカン ライムN	AM	366015	4582350176513
S801 ヨックスディスポミカン オレンジN	AM	366016	4582350176520
S801 ヨックスディスポミカン ミントN	AM	366018	4582350176537
ミカン(S801)用コントローラ(組) ピンクグレープ		366101	4582350176001
ミカン(S801)用コントローラ(組) ライム		366102	4582350176018
ミカン(S801)用コントローラ(組) オレンジ		366103	4582350176025
ミカン(S801)用コントローラ(組) ミント		366104	4582350176438
ヨックスディスポミカン(S801)ライナー1000cc(48個入)O		367302	4540752007910
ミカン(S801)用ホースハンガー		366201	4582350176032
ミカン(S801)用調整ハンドルカバーN		366205	4582350176582
ミカン(S801)用ホース差し(リング付)		366203	4582350176056
ミカン(S801)用キャニスタ		366125	4582350176445
ミカン(S801)用キャニスタパックン		366204	4582350176094
ミカン(S801)用キャニスタホルダーN(ピンクグレープ)		366151	4582350176544
ミカン(S801)用キャニスタホルダーN(ライム)		366152	4582350176551
ミカン(S801)用キャニスタホルダーN(オレンジ)		366153	4582350176568
ミカン(S801)用キャニスタホルダーN(ミント)		366154	4582350176575
SWペイシエントホース1.8m(50本)		365091	4540752007392
VacプロテクターO		338037	4540752008047
シールA		322003	

■使いきりライナー



■ミカン本体



■カラーバリエーション



●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。 ●製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

発売元 株式会社小池メディカル
本 社 〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
03-5662-6605（代）
www.koike-medical.co.jp



■お問い合わせは

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

人に寄り添う看護のお役に立ちたい
皆様に寄り添う壁かけ式吸引器



壁かけ式ディスポ吸引器

yoex S-801 DISPO mikan
ヨックスディスポ ミカン



看護師さんの力となり、
環境感染対策をサポート。
それは患者さんを守ること。

壁かけ式吸引器ミカンは
医療現場で大切な三つの
“カン”をアシストします。

壁かけ式ディスポ吸引器

yoex S-801 **DISPO** mikan
ヨックスディスポ ミカン



看

看護師さんの力となる

シンプルな操作手順により、
業務負担を軽減します。

環

環境感染対策

ディスポタイプで
感染・汚染リスクを回避。
洗浄、消毒ができ衛生的。

患

患者さんを守る


ぬくもりのある製品が
患者さん、ご面会のご家族の
不安低減につながります。

患者さん、医療従事者の皆様から感謝される企業になりたい。

壁かけ式ディスポ吸引器ミカンは、さらに使い勝手、安全性、耐久性を向上。
優れた吸引性能により患者さんへの負担を抑えながらも、環境感染対策とスムーズな
ライナー交換のための工夫は、医療や介護の現場で働く方々を堅実にサポートします。

頻度の高いライナー交換も
安全確実でスピーディーに

ライナーをキャニスターに差し込み、閉じるだけ。
ライナー内蔵の凝固剤は後処理や交換の手間を
大幅に省けます。

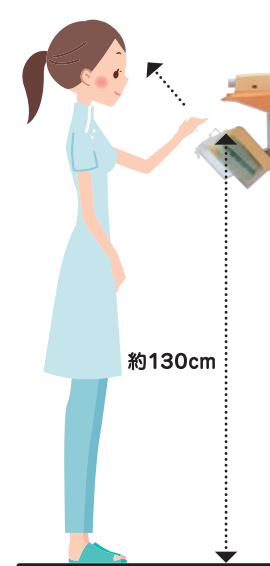

約130cm



ライナー交換時には、キャニスターが下がり床からの
高さは約130cm。その為、スムーズにライナー交換
することができます。またライナーを斜めに引き上げる
機構により、アウトレットからの吸引器の落下リスク
を低減します。

感染や汚染対策へも対応。
キャニスターの洗浄、
消毒が可能

排液は凝固剤によってゲル化します。
キャニスター、ホースハンガー、その他部品がウォッシャー
ディスインフェクターやベッドパンウォッシャー等での
洗浄、消毒が可能です。



確実な吸引手技の実現

吸引性能を大きく向上。気管吸引のガイドラインで推
奨される、吸引圧力設定-20kPaでもしっかりと
吸引ができます。また、カテーテルを閉塞せずに最大
吸引圧を設定可能な、ゲージレスコントローラーを採
用。安全で確実な吸引が可能です。

