


Outlet Equipments アウトレットバルブ付器具


圧力調整器

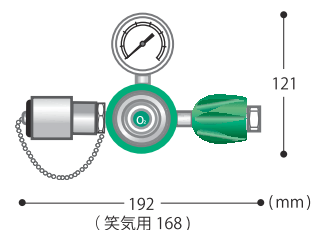

仕様

項目	内容・形式		
一般的名称	高圧ガスレギュレータ		
販売名	ME調整器T(酸素用) アウトレット式	ME調整器T(空気用) アウトレット式	ME調整器T(笑気用) アウトレット式
届出番号	10B2X00014B00028	10B2X00014B00030	10B2X00014B00032
入口圧力	19.6 MPa 以下		
出口圧力	0.43±0.02MPa (ポンベ圧 8MPa 時)		
接続ナット	W22-14山		W27 P=2
質量	約 1070g		約 1020g
手締めハンドル	有		無

・一般医療機器・特定保守管理医療機器

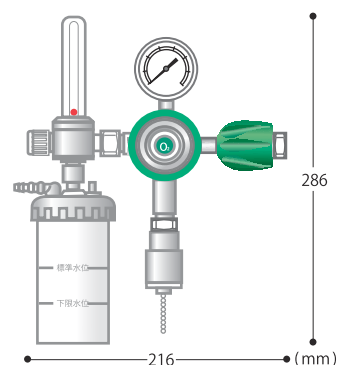


項目	内容・形式
一般的名称	高圧ガスレギュレータ
販売名	セフティフロー P-323T
届出番号	10B2X00014B00034
入口圧力	19.6MPa以下
出口圧力	0.43±0.02MPa (ポンベ圧 8MPa 時)
流量範囲	1~15L/min
接続ナット	W22-14山
質量	約1530g

・一般医療機器・特定保守管理医療機器

二又アウトレット

仕様

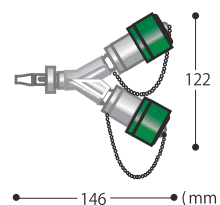

項目	内容・形式			
種類	酸素	空気	吸引	笑気
質量	約590g			
アウトレットへの 取付状態	横	縦		

パイピングスタンド

仕様



項目	内容・形式		
種類	酸素 O-O	吸引 V-V	酸素/吸引 O-V
質量	約4.0kg	約4.2kg	約4.3kg
ホース長	5 m		



注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。



発売元 株式会社小池メディカル
本 社 〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
03-5662-6605 (代)
<http://www.koike-medical.co.jp/>

製造販売元 株式会社 群馬コイケ 〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町 222-1

お問い合わせは

15083000MK

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

Outlet Equipments アウトレットバルブ付器具

状況に応じて選べる
着脱スムーズ、使いやすい。



状況や目的に応じて
選択できる、
アウトレットバルブ。
用途別に
3機種ラインアップ。

■ ボンベを使って
アウトレットを利用したい。

圧力調整器




手締めハンドル式だから着脱操作简单です。
しかも軽量、小型の一段減圧ながら、安定した
特性を示します。
酸素用は内側の急激な圧力上昇を防止する、
断熱圧縮熱発生防止機構付きです。



ME調整器(酸素用)



ME調整器(空気用)

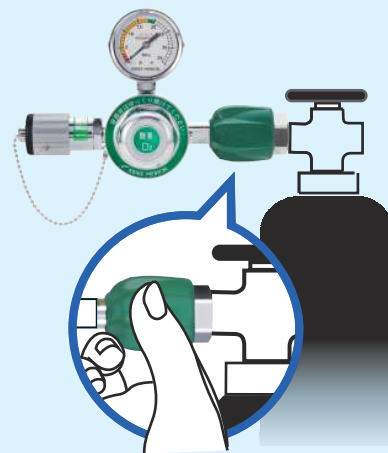


*笑気ガス用もご用意できます。 手締めハンドル スパナ不要
(笑気ガス用は手締めハンドルはありません。)

<セフティフロー>




P-323形

<供給流量変化に対する出口圧力特性>

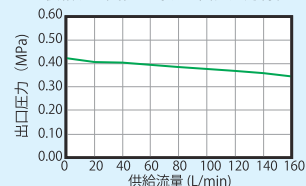

<入口圧力変化に対する出口圧力特性>

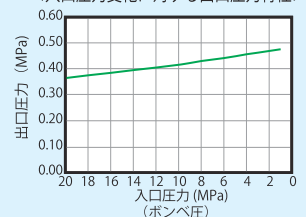


■ 緊急時に増設して
アウトレットを利用したい。

二又アウトレット



同時に二つのガス供給に対応できる
二又アウトレットバルブです。

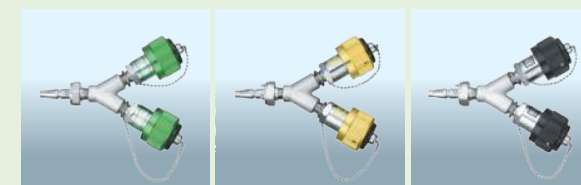

酸素

空気

吸引



酸素

空気

吸引

*笑気ガス用もご用意できます。

アウトレットの形式はピンインデックス方式とシュレーダー方式をお選び頂けます。

ピンインデックス方式



酸素

笑気

空気

吸引

アダプター

・使用ガスによってソケットのガイドピンホルルの位置が異なっています。

シュレーダー方式



酸素

笑気

空気


吸引

アダプター

・使用ガスによってソケットの溝部径が異なっています。

■ 壁から離れた自由な位置で
アウトレットを利用したい。

パイピングスタンド

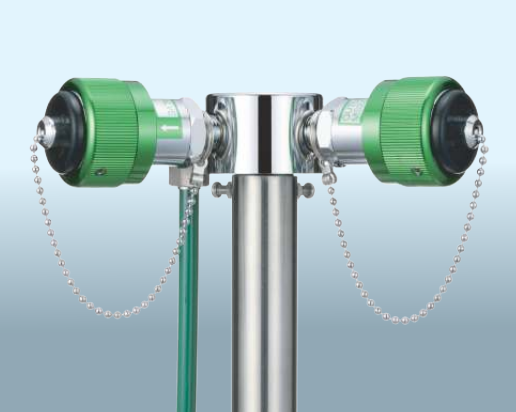

通常利用する位置から離れた所でご利用
できる、スタンド式アウトレットです。
キャスター付きスタンドですから、移動
は自由自在です。




(酸素用) O-O



(吸引用) V-V



(酸素用/吸引用) O-V

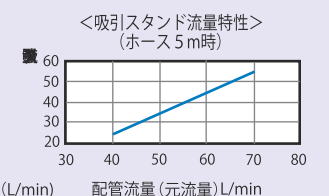

Outlet Equipments
アウトレットバルブ付器具